

Pharmacy and Laboratory Refrigerator Easy Line

Modelo · Model

MLRE 66 G

Ref.

800902V1200

EAN

5601359902127

HSCODE

84185019



W 450
D 470
H 740



52



35



+2/+15

Descrição

Equipamento versátil que pode ser utilizado tanto para farmácia como laboratório. Dadas as suas dimensões, pode ser colocado sobre balcão ou suspenso na parede através das barras traseiras. O interior em plástico termoformado facilita a limpeza das superfícies, evitando a acumulação de bactérias e germes, e o exterior em chapa especial plastificada evita o aparecimento de corrosão com a utilização.

Excelente estabilidade, uniformidade e precisão de temperatura, garantida através do isolamento de 50 mm em poliuretano Base Água, sistema de refrigeração com frio ventilado e descongelação automática, bem como uma rápida recuperação de temperatura após abertura de porta. O setpoint definido de fábrica é de +5°C, podendo facilmente ser ajustado no intervalo entre +2°C a +15°C.

De serie com fechadura para evitar acessos indevidos, 3 prateleiras amovíveis em aço plastificado para evitar corrosão, porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, reversível e com retorno automático à posição de fechada, iluminação led, puxador de design ergonómico e fácil limpeza, e 4 pés ajustáveis permitindo nivelar o equipamento.

*Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.*

medgree.com

Title Pres.

Versatile equipment that can be used for both pharmacy and laboratory. Due its dimensions, it can be placed on top of a counter or suspended in the wall using the metal bars on back. The thermoformed plastic interior facilitates the cleaning, preventing the accumulation of bacteria and germs, and the exterior made of special plastic coated steel prevents the appearance of corrosion with use.

Excellent stability, uniformity and temperature accuracy, guaranteed through the 50 mm water-based polyurethane insulation, refrigeration system with ventilated cold and automatic defrosting, as well as a quick temperature recovery after opening the door. The factory setpoint is +5°C, which can easily be adjusted in the range between +2°C and +15°C.

Standard with lock to prevent unauthorized access, 3 removable shelves in plastic coated steel to prevent corrosion, double tempered low-emission glass door, reversible and with automatic return to the closed position, led lighting, handle with ergonomic design and easy cleaning, and 4 adjustable feet allowing to level the equipment.

A proud member of  Olitrem family

Características Easy line

Termostato Easy Easy Controller



Características

Fácil e intuitivo

Gestão simplificada do equipamento

Controlo preciso

Sonda NTC com precisão de 0,1°C

Alarmes visíveis e sonoros

Temperatura alta
Temperatura baixa
Porta aberta
Falha na sonda

Termostato de segurança

Dupla segurança para evitar que a temperatura baixe dos +2°C

Orifício para sonda externa

Diâmetro 12 mm para passagem de sonda de dispositivo de monitorização externo

Saída Alarme Remoto

Contacto livre de potencial para ligação a alarmes externos

Features

Easy and intuitive

Simplified equipment management

Precise control

NTC probe with a precision 0,1°C

Audible and visible alarms

High temperature
Low temperature
Open door
Probe failure

Safety controller

Double safety to prevent the temperature from dropping from +2°C

Hole for external probe

Diameter 12 mm to pass the probe from external monitoring system

Remote alarm output

Tension free contact for connection to external alarms

Pharmacy and Laboratory Refrigerator Easy Line

Modelo · Model
MLRE 66 G

Ref.
800902V1200

Características · Characteristics

- 01** Termostato Linha Easy
Easy Line controller
- 02** Furo para sonda externa
Hole for external probe
- 03** Suporte de parede série 36 /66
Wall mounted for Serie 36 / 66
- 04** Fechadura de série
Lock included
- 05** Puxador externo
External handle
- 06** Termostato segurança
Safety thermostat



Pharmacy and Laboratory Refrigerator

Easy Line

Modelo · Model

MLRE 66 G

Ref.

800902V1200



Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	331 mm	
Profundidade interior	Internal depth	257 mm	
Altura interior	Internal height	590 mm	
Isolamento	Insulation	50 mm	
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m ³ High density water base polyurethane 42Kg/m ³	
Volume bruto	Gross volume	52 Lts	
Volume líquido	Liquid volume	30 Lts	
Peso líquido	Net weight	35 Kg	
Peso com embalagem	Weight with packaging	37 Kg	
Material interior	Interior material	Poliestireno de Alta Densidade Branco White High Density Polystyrene	
Material exterior	Exterior material	Chapa Plástica Branca (Skinplate) White Coated Steel	
Material traseiro	Back material	Poliestireno de Alta densidade High Density Polystyrene	
Prateleiras	Shelves	2x(346x203) + 1x(346x150) em Aço Plástico 2x(346x203) + 1x(346x150) in Plasticized Steel	
Peso max. / Prateleira	Max. weight / Shelves	7 Kg	
Nº gavetas (Standart / Max)	Nº drawers (Standart / Max)	— / —	
Peso max. / Gaveta	Max. weight / Drawer	—	
Material gaveta	Drawer material	—	
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Niveladores 4 Levelers	
Porta	Door	<input type="radio"/> Opaca · Solid	<input checked="" type="radio"/> Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES	<input type="radio"/> NÃO · NO
Fechadura	Lock	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES	<input type="radio"/> NÃO · NO
Descongelação	Defrost	<input checked="" type="radio"/> Automática · Automatic	<input type="radio"/> Manual · Manual
Condensador	Condenser	<input type="radio"/> Ventilado · Ventilated	<input checked="" type="radio"/> Estático · Static
Evaporador	Evaporator	<input checked="" type="radio"/> Ventilado · Ventilated	<input type="radio"/> Estático · Static
Iluminação	Lighting	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES	<input type="radio"/> NÃO · NO
Buraco Sonda Externa	External probe hole	<input checked="" type="radio"/> SIM · YES	<input type="radio"/> NÃO · NO
Potência Potência Frigorífica	Power Cooling Capacity	85 W 122 W	
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz	
Comprimento cabo de alimentação	Power supply length	2,5 m	
Consumo	Consumption	785 Kwh/ano 785 Kwh/year	
Nível de Ruído	Noise Level	< 45 dBa	
Termostato	Controller	Digital EASY	
Gás	Gas	R600a	
Carga de gás	Gas load	22 g	

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Pharmacy and Laboratory Refrigerator Easy Line


Modelo · Model

MLRE 66 G


Ref.

800902V1200

Accessórios · Accessories

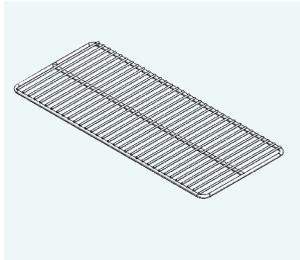

Prateleira Pequena · Small Shelf
Cód. 007121

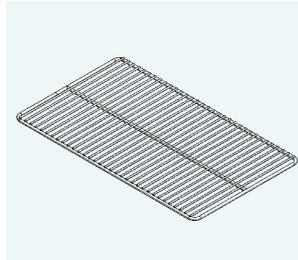

Prateleira Grande · Big Shelf
Cód. 007121_100



Embalagem Madeira · Wood Package


Pharmacy and Laboratory Refrigerator

Easy Line


Modelo · Model
MLRE 66 G

Ref.
800902V1200

Desenho Técnico · Technical Drawing



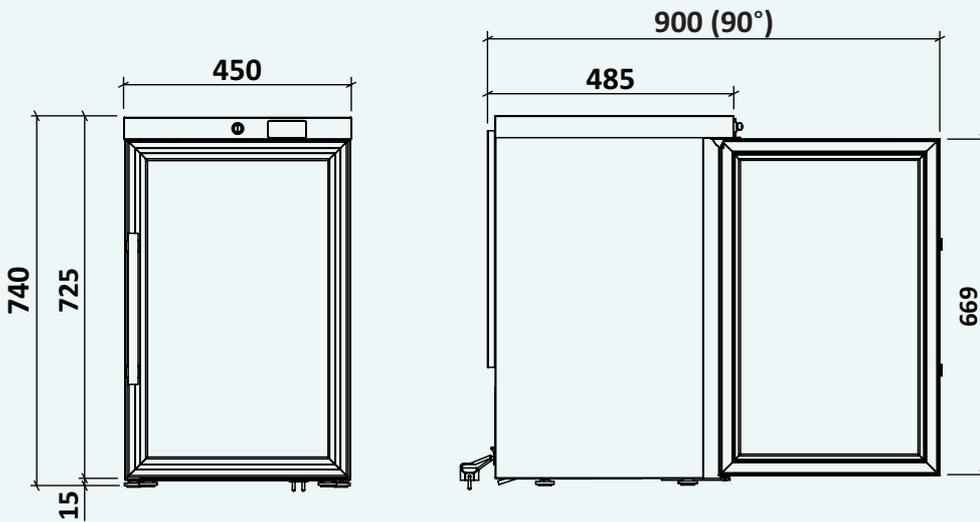


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)

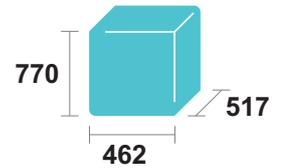

Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
336	144	300

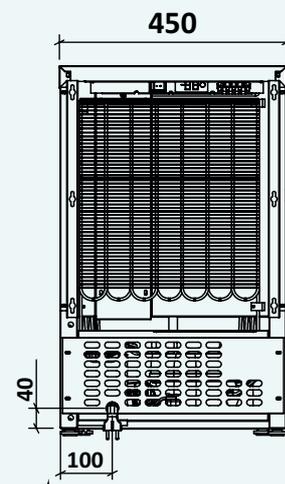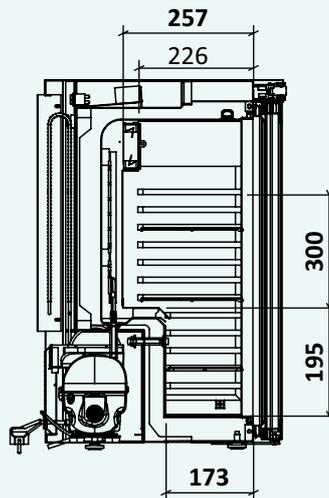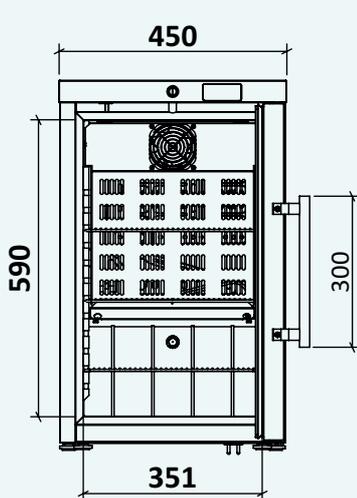

Cabo Alimentação
Power Supply

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.