

Laboratory Freezer Easy Line

Modelo · Model

MLFE 150 S

Ref.

800911V600

EAN: 5601359911600

HSCode: 84185011



W 600
D 600
H 835



115



45



-10/-25

Descrição

Equipamento que dadas as suas dimensões é ideal para encastrar em balcões ou áreas de trabalho de laboratórios, clínicas ou hospitais. O interior em alumínio e exterior em chapa especial plastificada evita o aparecimento de corrosão com a utilização.

Excelente estabilidade, uniformidade e precisão de temperatura, garantida através do isolamento de 60 mm em poliuretano Base Água, sistema de frio estático nas paredes, permitindo ajustar as prateleiras em altura, e descongelação manual. O setpoint definido de fábrica é de -18°C, podendo facilmente ser ajustado no intervalo entre -10°C a -25°C. Com homogeneidade de temperatura interna de +/- 5°C. Dispõe de um orifício de 12mm de diâmetro para passagem de sonda de dispositivo de monitorização externo.

De serie com fechadura para evitar acessos indevidos, 3 prateleiras amovíveis em aço plastificado para evitar corrosão, porta opaca reversível e com retorno automático à posição de fechada, puxador de design ergonómico e fácil limpeza, e 4 pés ajustáveis permitindo nivelar o equipamento.

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Title Pres.

Equipment that due its dimensions, it is the ideal equipment to embed in counters or work areas in laboratories, hospital and clinics. The interior in aluminium and exterior in special plasticized steel prevents the appearance of corrosion with use.

Excellent stability, uniformity and temperature accuracy, guaranteed through the 60 mm water-based polyurethane insulation, refrigeration system with static cold on walls allowing to adjust the shelves in high and manual defrost. The factory setpoint is -18°C, which can easily be adjusted in the range between -10°C and -25°C. With internal temperature homogeneity of +/- 5°C. It has a hole with diameter 12mm to pass a probe for external monitoring system.

Standard with lock to prevent unauthorized access, 3 removable Baskets in wire with transparent plastic front as standard and flat bottom allow perfect sample preservation, reversible solid door with automatic return to the closed position, handle with ergonomic design and easy cleaning, and 4 adjustable feet allowing to level the equipment.

Características Easy line

Termostato Easy
Easy Controller



Características

Fácil e intuitivo

Gestão simplificada do equipamento

Controlo preciso

Sonda NTC com precisão de 0,1°C

Alarmes visíveis e sonoros

Temperatura alta

Temperatura baixa

Porta aberta

Falha na sonda

Saída Alarme Remoto

Contacto livre de potencial para ligação a alarmes externos

Datalogger

Consulta de temperatura máxima e mínima nas ultimas 72 horas no display

Wi-Fi (opcional)

Para monitorização remota do equipamento e envio de alertas

Features

Easy and intuitive

Simplified equipment management

Precise control

NTC probe with a precision 0,1°C

Audible and visible alarms

High temperature

Low temperature

Open door

Probe failure

Remote alarm output

Tension free contact for connection to external alarms

Datalogger

Query maximum and minimum temperatures on last 72 hours on display

Wi-Fi (opcion)

For remote monitoring of the equipment and alert messages

Termostato Easy Ligação EVlink

Easy Controller Evlink Connection

Aplicação disponível para sistemas IOS e ANDROID para interação com o termostato do equipamento, através de Wi-Fi. Desta forma tem acesso no seu dispositivo móvel, através do acessório Evlinking Wi-Fi, ao estado de preservação dos seus produtos, bem como receber alertas em caso de desvios e alarmes.

Application available for IOS and ANDROID systems for interaction with the equipment controller, via Wi-Fi. This way, through the EVlinking Wi-Fi accessory, you have access to the state of preservation of your products, as well as receive alerts in case of alarms.

O EVlinking Wi-Fi é um módulo de hardware com conectividade Wi-Fi que pode ser ligado ao termostato da linha Easy, para aceder às funcionalidades da plataforma cloud EPoCA® ou de outros sistemas de controlo ou aquisição de dados através do protocolo MODBUS TCP.

Para permitir a integração com sistemas do cliente, o módulo EVlinking Wi-Fi pode também ser ligado a dispositivos de terceiros utilizando o protocolo MODBUS RTU através da porta RS-485. O EVlinking Wi-Fi é facilmente configurado a partir de um navegador web ou da aplicação dedicada EPoCA Start, disponível tanto para Android como para IOS.


The EVlinking Wi-Fi is a hardware module with Wi-Fi connectivity that can be connected to thermostats from the Easy range to access the functionalities of the EPoCA® cloud platform or other control or data acquisition systems via the MODBUS TCP protocol.

To enable integration with customer systems, the EVlinking Wi-Fi module can also be connected to third-party devices using the MODBUS RTU protocol through the RS-485 port. The EVlinking Wi-Fi is easily configured via a web browser or through the dedicated EPoCA Start app, available for both Android and iOS.



APP dedicada para conexão remota ao equipamento.

Dedicated application for remote equipment connectivity.

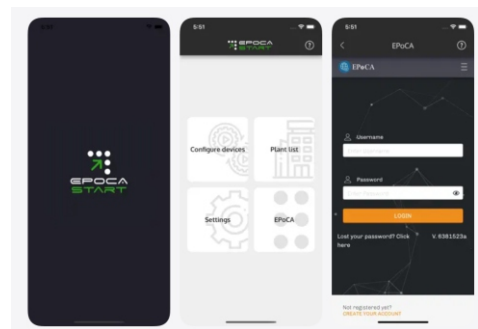


A aplicação permite-lhe:

- Ver eventos em tempo real e receber alertas automáticos por email;
- Aceder a configurações do equipamento e ajustar setpoint;
- Consultar gráficos de funcionamento do equipamento;
- Consultar histórico de dados;

The application allows you to:

- View events in real time and receive automatic email alerts;
- Access equipment settings and adjust the setpoint;
- View equipment operating graphs;
- Consult historical data;

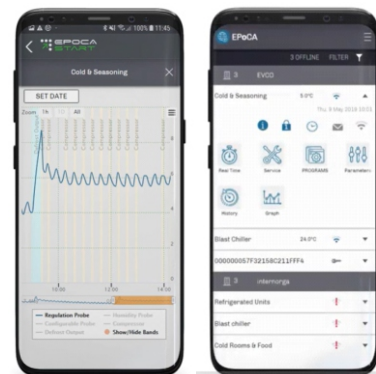

Modelo · Model

MLFE 150 S

Ref.

800911V600

Características · Characteristics

01 Termostato Linha Easy
Easy Line controller

02 Furo para sonda externa
Hole for external probe

03 Fechadura de série
Lock included

04 Puxador externo
External handle

05 Alarme remoto
Remote Alarm



Laboratory Freezer

Easy Line

Modelo · Model

MLFE 150 S

Ref.

800911V600

Características Técnicas

Technical Features

Largura interior	Internal width	460 mm
Profundidade interior	Internal depth	410 mm
Altura interior	Internal height	680 mm
Isolamento	Insulation	60 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	115 Lts
Volume líquido	Liquid volume	108 Lts
Peso líquido	Net weight	45 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	48 Kg
Material interior	Interior material	Alumínio Branco White Amuninum
Material exterior	Exterior material	Chapa Plastificada Branca White coated steel
Material traseiro	Back material	Poliestireno de alta densidade High density water base polystyrene
Prateleiras	Shelves	2x(460x407) + 1x(460x240) em Aço Plastificado 2x(460x407) + 1x(460x240) in Plasticized Steel
Peso max. / Prateleira	Max. weight / Shelves	18.3 Kg
Nº gavetas (Standart / Max)	Nº drawers (Standart / Max)	— / -
Peso max. / Gaveta	Max. weight / Drawer	—
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Niveladores 4 Levelers
Porta	Door	☒ Opaca · Solid ☐ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☐ Automática · Automatic ☒ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated ☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☐ Ventilado · Ventilated ☒ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Buraco Sonda Externa	External probe hole	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Potência Potência Frigorífica	Power Cooling Capacity	78 W 130 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2.5 m
Consumo	Consumption	387 Kwh/ano 387 Kwh/year
Nível de Ruído	Noise Level	< 45 dBa
Homogeneidade	Homogeneity	+/-5°C
Termostato	Controller	EASY
Gás	Gas	R600a
Carga de gás	Gas load	45 g

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Laboratory Freezer Easy Line


Modelo · Model

MLFE 150 S

Ref.

800911V600


Acessórios · Accessories

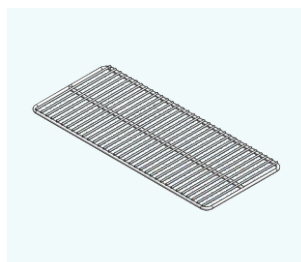


Prateleira Pequena Small Shelf
Cód. 007120




Kit Calha Suporte Prateleira Shelf Holder Kit
Cód. 007120_001

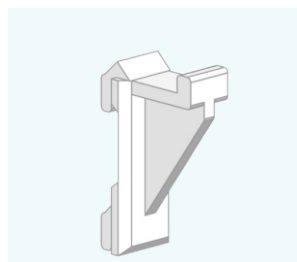

Dental - Suporte Prateleira Shelf support
Cód. 004042_002

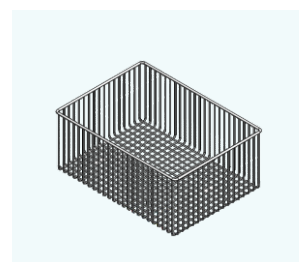

Cesto pequeno Small Basket
Cód. 003353_100

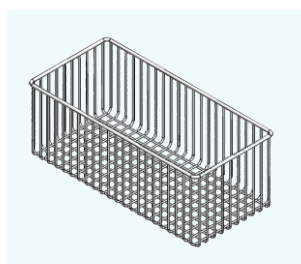

Cesto grande Big Basket
Cód. 003353



Kit Empilhamento Stacking Kit
Cód. 129032V400



Kit conectividade Wi-Fi Wi-Fi Connectivity
Cód. 129076V0000




Embalagem Madeira Wood Package

Laboratory Freezer
Easy Line

Modelo · Model
MLFE 150 S

Ref.
800911V600

Desenho Técnico · Technical Drawing

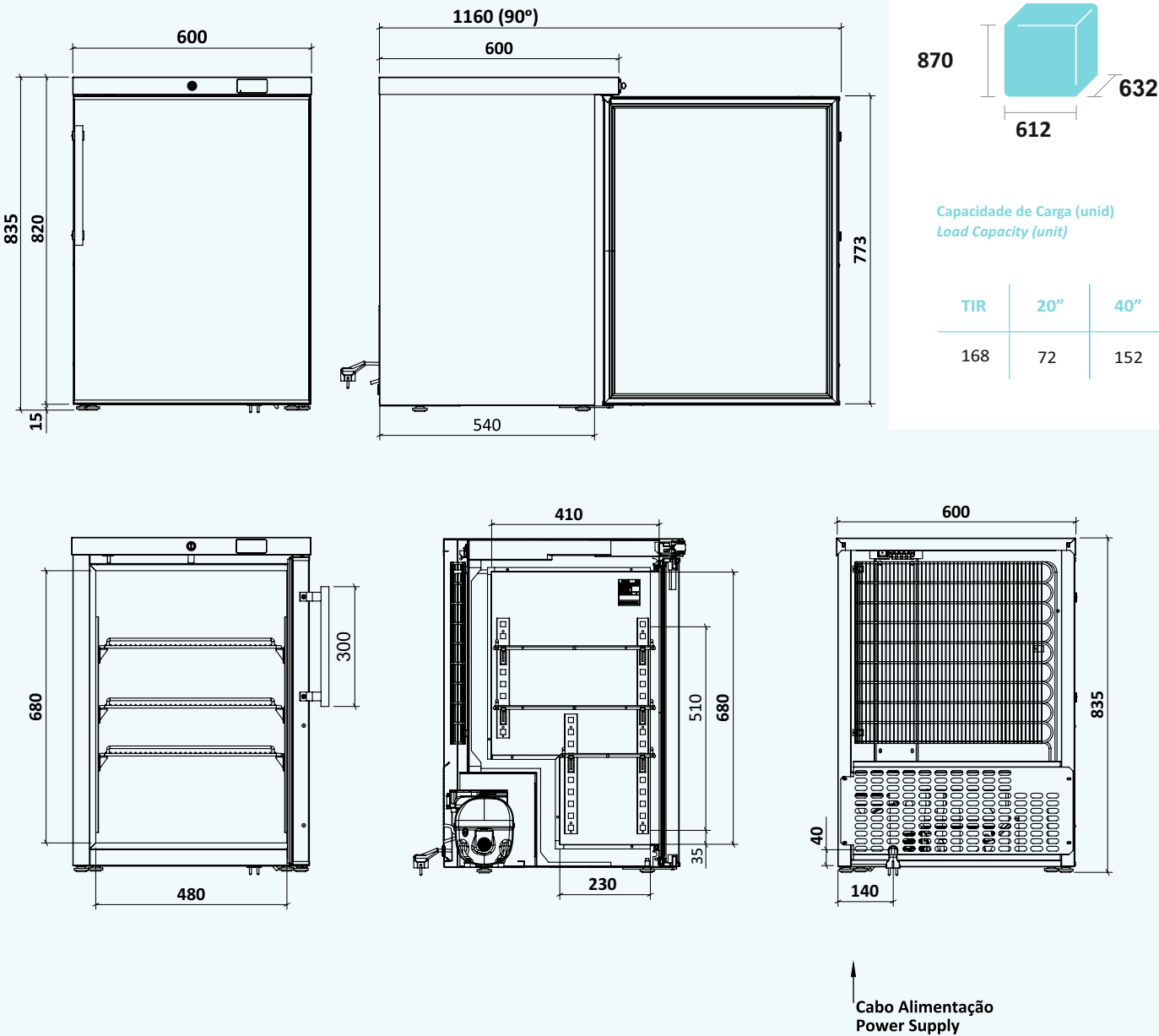

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.