

Pharmacy and Laboratory Refrigerator Easy Line

Modelo · Model

MLRE 36 G

Ref.

800900V900

EAN

5601359900901

HSCODE

84185019

**W 450**
D 470
H 540**30** **31** **+2/+15**

Descrição

Equipamento versátil que pode ser utilizado tanto para farmácia como laboratório. Dadas as suas dimensões, pode ser colocado sobre balcão ou suspenso na parede através das barras traseiras. O interior em plástico termoformado facilita a limpeza das superfícies, evitando a acumulação de bactérias e germes, e o exterior em chapa especial plastificada evita o aparecimento de corrosão com a utilização.

Excelente estabilidade, uniformidade e precisão de temperatura, garantida através do isolamento de 50 mm em poliuretano Base Água, sistema de refrigeração com frio ventilado e descongelação automática, bem como uma rápida recuperação de temperatura após abertura de porta. O setpoint definido de fábrica é de +5°C, podendo facilmente ser ajustado no intervalo entre +2°C a +15°C.

De série com fechadura para evitar acessos indevidos, 2 prateleiras amovíveis em aço plastificado para evitar corrosão, porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, reversível e com retorno automático à posição de fechada, iluminação led, puxador de design ergonómico e fácil limpeza, e 4 pés ajustáveis permitindo nivelar o equipamento.

*Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.*

Title Pres.

Versatile equipment that can be used for both pharmacy and laboratory. Due its dimensions, it can be placed on top of a counter or suspended in the wall using the metal bars on back. The thermoformed plastic interior facilitates the cleaning, preventing the accumulation of bacteria and germs, and the exterior made of special plastic coated steel prevents the appearance of corrosion with use.

Excellent stability, uniformity and temperature accuracy, guaranteed through the 50 mm water-based polyurethane insulation, refrigeration system with ventilated cold and automatic defrosting, as well as a quick temperature recovery after opening the door. The factory setpoint is +5°C, which can easily be adjusted in the range between +2°C and +15°C.

Standard with lock to prevent unauthorized access, 2 removable shelves in plastic coated steel to prevent corrosion, double tempered low-emission glass door, reversible and with automatic return to the closed position, led lighting, handle with ergonomic design and easy cleaning, and 4 adjustable feet allowing to level the equipment.

Características Easy line

Termostato Easy Easy Controller



Características

Fácil e intuitivo

Gestão simplificada do equipamento

Controlo preciso

Sonda NTC com precisão de 0,1°C

Alarmes visíveis e sonoros

Temperatura alta

Temperatura baixa

Porta aberta

Falha na sonda

Termostato de segurança

Dupla segurança para evitar que a temperatura baixe dos +2°C

Saída Alarme Remoto

Contacto livre de potencial para ligação a alarmes externos

Orifício para sonda externa

Diâmetro 12 mm para passagem de sonda de dispositivo de monitorização externo

Datalogger

Consulta de temperatura máxima e mínima nas ultimas 72 horas no display

Features

Easy and intuitive

Simplified equipment management

Precise control

NTC probe with a precision 0,1°C

Audible and visible alarms

High temperature

Low temperature

Open door

Probe failure

Safety controller

Double safety to prevent the temperature from dropping from +2°C

Remote alarm output

Tension free contact for connection to external alarms

Hole for external probe

Diameter 12 mm to pass the probe from external monitoring system

Datalogger

Query maximum and minimum temperatures on last 72 hours on display

Pharmacy and Laboratory Refrigerator Easy Line

Modelo · Model
MLRE 36 G

Ref.
800900V900

Características · Characteristics

- 01** Termostato Linha Easy
Easy Line controller
- 02** Furo para sonda externa
Hole for external probe
- 03** Suporte de parede série 36 / 66
Wall mounted for Serie 36 / 66
- 04** Fechadura de série
Lock included
- 05** Puxador externo
External handle
- 06** Termostato segurança e alarme remoto
Safety thermostat remote alarm



Pharmacy and Laboratory Refrigerator

Easy Line

Modelo · Model

MLRE 36 G

Ref.

800900V900



Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	331 mm
Profundidade interior	Internal depth	257 mm
Altura interior	Internal height	391 mm
Isolamento	Insulation	50 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	30 Lts
Volume líquido	Liquid volume	20 Lts
Peso líquido	Net weight	31 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	33 Kg
Material interior	Interior material	Poliestireno de Alta Densidade Branco White High Density Polystyrene
Material exterior	Exterior material	Chapa Plástica Branca (Skinplate) White Coated Steel
Material traseiro	Back material	Poliestireno de Alta densidade High Density Polystyrene
Prateleiras	Shelves	1x(346x203) + 1x(346x150) em Aço Plástico 1x(346x203) + 1x(346x150) in Plasticized Steel
Peso max. / Prateleira	Max. weight / Shelves	7 Kg
Nº gavetas (Standart / Max)	Nº drawers (Standart / Max)	— / —
Peso max. / Gaveta	Max. weight / Drawer	—
Material gaveta	Drawer material	—
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Niveladores 4 Levelers
Porta	Door	☐ Opaca · Solid ☒ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic ☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated ☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Buraco Sonda Externa	External probe hole	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Potência Potência Frigorífica	Power Cooling Capacity	85 W 122 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power supply length	2,5 m
Consumo	Consumption	626 Kwh/ano 626 Kwh/year
Nível de Ruído	Noise Level	< 45 dBa
Termostato	Controller	Digital EASY
Gás	Gas	R600a
Carga de gás	Gas load	19 g


Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Pharmacy and Laboratory Refrigerator Easy Line


Modelo · Model
MLRE 36 G

Ref.
800900V900

Acessórios · Accessories

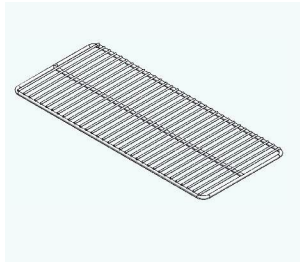

Prateleira Pequena · Small Shelf
Cód. 007121

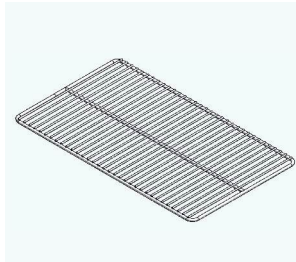

Prateleira Grande · Big Shelf
Cód. 007121_100



Kit Conectividade Wi-Fi Easy
Easy connectivity Wi-Fi Kit
Cód. 129076V0000




Embalagem Madeira · Wood Package

Pharmacy and Laboratory Refrigerator Easy Line


Modelo · Model
MLRE 36 G

Ref.
800900V900

Desenho Técnico · Technical Drawing



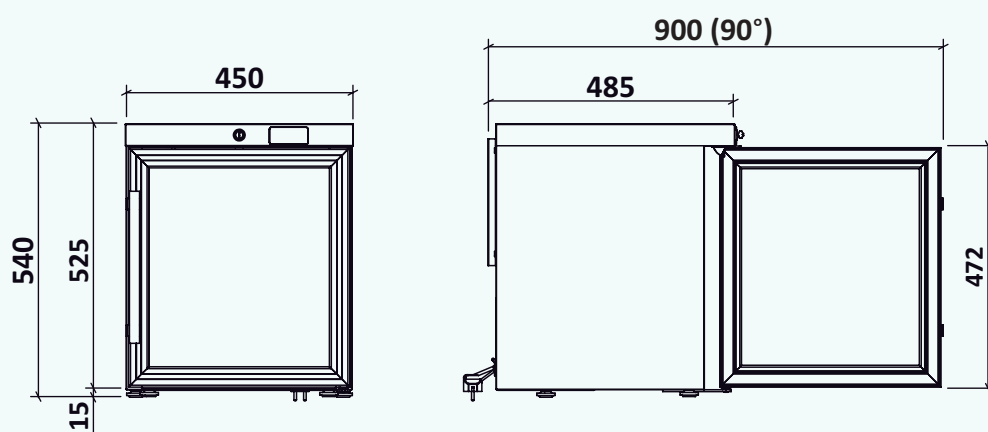


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)

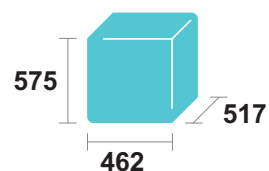

Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
448	192	400

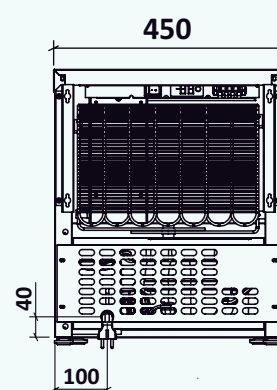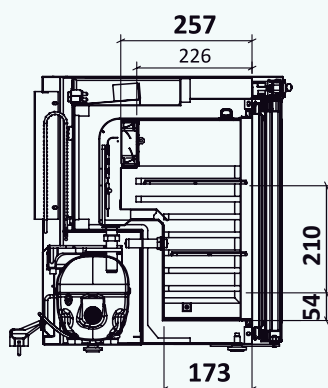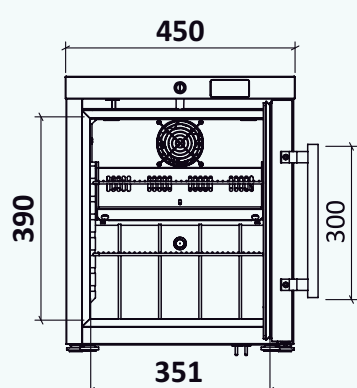

Cabo Alimentação
Power Supply